



oclean

**Električna zobna ščetka
Oclean X/Oclean X Pro**

Uporabniški priročnik

Hvala, ker uporabljate pametno sonično električno zobno ščetko Oclean X.

Pomembne varnostne informacije:

- Izdelek lahko uporabljajo osebe starejše od 12 let.
- Zaradi vibracij visoke hitrosti lahko med prvo uporabo zobne ščetke pride do skelenja. Ta občutek ob redni uporabi ščetke postopoma izgine.
- Zobna ščetka se lahko med polnjenjem segreje. Če se zobna ščetka segreje na zelo visoko temperaturo, takoj prenehajte s polnjenjem in/ali izključite ščetko in se obrnite na pooblaščen Oclean servis.
- Na zobni ščetki lahko uporabljate le nadomestne ščetke znamke Oclean.
- Zobna ščetka je namenjena samo oralni uporabi, to je za ščetkanje zob, čiščenje jezika ali masažo dlesni. Ne uporabljajte je v druge namene.
- Zobna ščetka je osebni predmet. Izdelek ni namenjen uporabi v zobnih klinikah in se ne sme deliti z drugimi osebami.
- Zobna ščetka se lahko uporablja samo v zaprtih prostorih in ne sme biti preveč časa direktno izpostavljena soncu. Shranjujte jo v hladnem in suhem prostoru.
- Kadar polnilca ne uporabljate ali ga čistite, ga izklopite iz napajanja. Polnilne kontakte redno čistite, da se izognete prahu in umazaniji, ki lahko zmanjšata učinkovitost polnjenja.

Osebe s povečano občutljivostjo ustne votline

Izdelek naj previdno uporabljajo naslednje kategorije ljudi:

1. Ljudje, ki so prestali parodontalne operacije ali se trenutno zdravijo za ustne bolezni.
2. Ljudje, ki imajo težave z ustno votlino, slabo vzdrževane umetne zobe, ali
3. krvaveče dlesni.
Ljudje s povečano občutljivostjo ustne votline naj se pred uporabo izdelka posvetujejo z zobozdravnikom.

Zobna ščetka ni primerna za ljudi z omejenimi duševnimi in fizičnimi sposobnostmi. Prav tako ni primerna za dojenčke in otroke mlajše od 12 let. Otroci lahko izdelek uporabljajo le pod nadzorom odraslih.



Navodila

Prva uporaba

Pri prvi uporabi ščetke je po pritisku gumba za vklop Bluetooth vklopljen dolgo časa. Prenesite aplikacijo Oclean, jo namestite in zaključite s povezavo.

Namestitev aplikacije in nastavitve ščetke

Skenirajte QR kodo, da namestite aplikacijo in si prilagodite svoj lasten plan ščetkanja zob. Po tem se bo celoten proces čiščenja zob, beljenja ter masiranja dlesni opravil samodejno v enem procesu ščetkanja. Aplikacije ni potrebno odpirati na dnevni ravni, priporočljivo pa je, da ščetko na nekaj dni povežete z aplikacijo, da se sinhronizirajo podatki o ščetkanju in osvojenih točkah za pridobivanje dodatkov v aplikaciji.

Uporaba brez aplikacije

Ščetko lahko uporabljate tudi brez povezave z aplikacijo. Ko se vam na ščetki izpiše "Connect toothbrush" (povezava ščetke), izberite "Skip" (preskoči). Ščetko lahko upravljate preko zaslona na dotik na ščetki ter z gumbom za vklop.

Stanje delovanja ter stanje pripravljenosti

Ko ščetko odstranite s polnilca, bo avtomatsko prešla iz stanja pripravljenosti v stanje delovanja. Ko po končanem ščetkanju 8 sekund ščetke ne uporabljate, se avtomatsko preklopi v stanje pripravljenosti.

Privzet plan ščetkanja in direktno ščetkanje

Ko je ščetka v stanju delovanja, pritisnite gumb za vklop in ščetka začne delovati v privzetem načinu "standardnega plana čiščenja" z šibko intenzivnostjo in trajanjem 2 min. Intenzivnost in način lahko spremenite v nastavitvah.

Menjava območja čiščenja

Če v aplikaciji ne nastavite ščetkanja po meri, se bo ščetka zagnala v privzetem načinu s standardnim 2-minutnim planom čiščenja.

Vsakih 30 sekund vas bo ščetka z vibriranjem opozorila, da zamenjajte območje ščetkanja. Po 2 minutah bo ščetka samodejno prenehala z delovanjem.

Prenapetost in zmanjšanje frekvence

Da bi preprečili pretiran pritisk v procesu ščetkanja zob, lahko ščetka samodejno zmanjša frekvenco delovanja, da se tako zaščiti sklenina in dlesni in prepreči pretirano ščetkanje.

Zmanjšanje frekvence lahko zaznate s spremembo zvoka delovanja motorja, na zaslonu pa se prikažejo večje ikone.

Pri tem ne gre za napako na motorju temveč za zaščito. To funkcijo lahko izklopite v nastavitvah.

Poročilo o ščetkanju


Po ščetkanju se na zaslonu izpiše dejanski čas čiščenja, točke čiščenja ter intenzivnost čiščenja na posameznem območju.

Iz diagrama lahko razberete, kje ste zobe premalo ščetkali ter intenzivnost čiščenja.


Nastavitev načina čiščenja

Do naprednih nastavitev lahko dostopate tako, da povlečete po zaslonu navzgor in navzdol.


V nastavitvah načina čiščenja imate na voljo 4 načine z 32 stopnjami intenzivnosti, kot npr. način čiščenja, način beljenja, način masiranja, itd. Ko zaključite z nastavitvami, se bodo samodejno shranile in ščetka jih bo pri naslednji uporabi upoštevala.

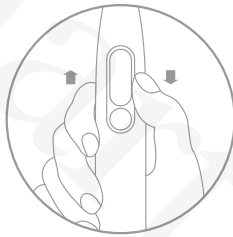

Povlecite navzgor
in navzdol

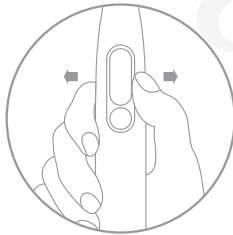

Povlecite levo in
desno

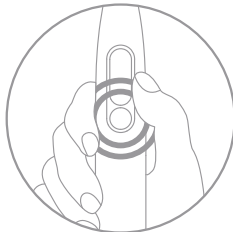

Tapnite



Ikona za vreme

Na zaslonu se vreme ne bo izpisalo, če več kot 7 dni podatkov na ščetki ne sinhronizirate z aplikacijo.



Ikona za Bluetooth

Ko ščetko povežete z aplikacijo, se na zaslonu izpiše ikona za Bluetooth.



Ikona za novo sporočilo

Ko imate nove informacije o aktivnostih, obvestilo o posodobitvi programske opreme ali druge hitre informacije, se prikaže ikona za sporočilo.



Učinkovitost čiščenja

Učinkovitost čiščenja je lahko visoka, srednja ali nizka. Gre za oceno glede na izbrani plan čiščenja.

Učinkovitost je lahko nizka, če je čas čiščenja prekratek.

Učinkovitost čiščenja se bo ustrezno spreminjala glede na čas čiščenja in intenzivnost čiščenja.



Točke

Rezultate čiščenja je po vsakem čiščenju mogoče pretvoriti v točke. S sinhronizacijo podatkov lahko točke prenesete tudi v aplikacijo.

V aplikaciji točke niso omejene, na zobni ščetki pa se lahko shrani do 999 točk. Če točk ne sinhronizirate z aplikacijo, se vse točke, ki presegajo število 999, ne bodo zabeležile.



Opozorilo za prazno baterijo

Ko se na zaslonu pojavi simbol za prazno baterijo, ščetko takoj napolnite. Med polnjenjem se bo na zaslonu izpisal procent stanja baterije. Ko je baterija popolnoma napolnjena, se na zaslonu izpiše 100%.

Plan čiščenja in nastavitve v aplikaciji

V aplikaciji lahko izberete plan čiščenja ali si ga prilagodite. Ogledate si lahko tudi točen nivo baterije ter posodobite programsko opremo.


Polnjenje

Spodnji del ščetke postavite na magnetno polnilno postajo. Med polnjenjem se na zaslonu izpiše procent stanja baterije. Da se ščetka popolnoma napolni običajno traja približno 2,5 ure. Pri nizki električni moči ali če ščetko polnite preko računalnika, lahko polnjenje traja tudi več kot 3 ure. Priporočljivo je napajanje z napajalnikom 5V/1A oz. 5V/2A.

Pomembni nasveti glede polnjenja

Ščetka ima mehanizem za hitro polnjenje.

Ko ščetke ne polnite, jo odložite na nastavek. Ščetke ne puščajte na polnilcu predolgo. To lahko povzroči, da se vgrajena baterija prehitro obrabi, kar vpliva na uporabniško izkušnjo.

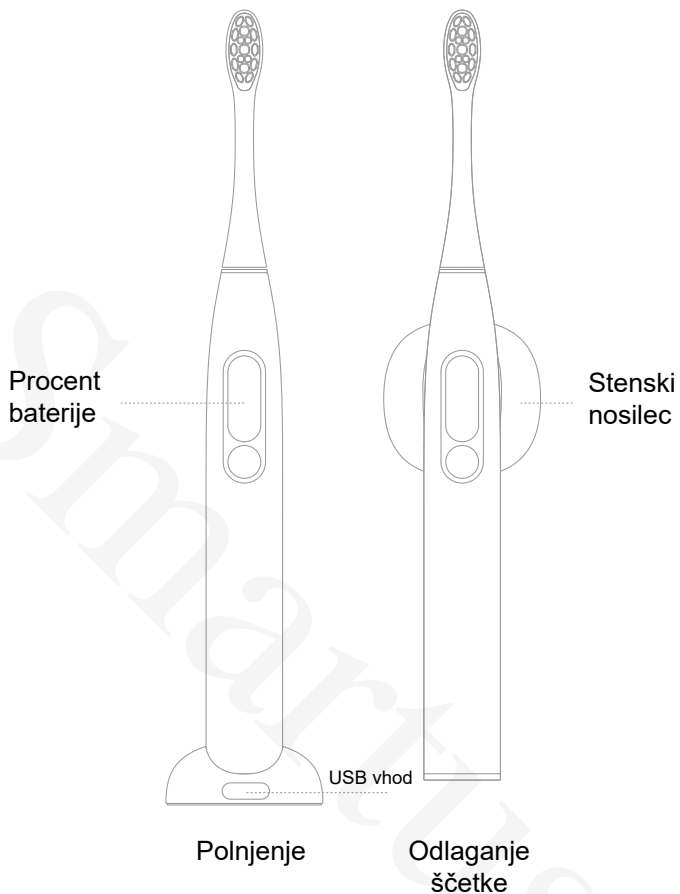


1. Naprave ne razstavlajte, je udarjajte in ne mečite je v ogenj.
2. Če se baterija napihne, prenehajte z uporabo zobne ščetke.
3. Baterije ne hranite v okolju z visoko temperaturo.
4. Če je v napravo vdrla voda, baterije ne uporabljajte.

Priporočljiva metoda ščetkanja zob

• Čas umivanja zob


Zobodravniki in strokovnjaki za ustno votlino priporočajo, da zobe umivate 2 do 3 minute.

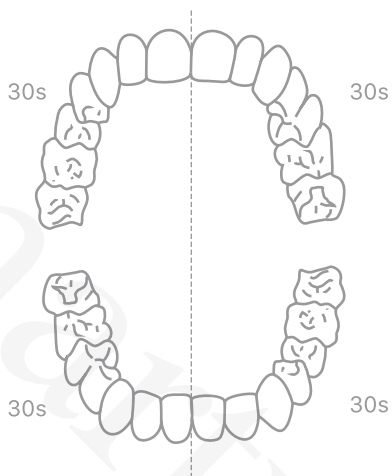


Zunanja stran 10s

Zgornja stran 10s

Notranja stran 10s

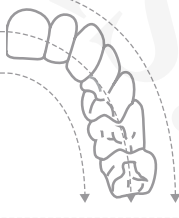

• Priporočljiva metoda ščetkanja zob

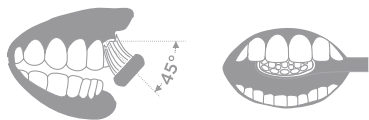

1

2



3



4




5



6

Koraki

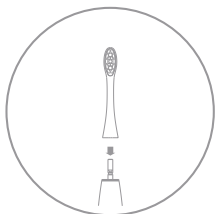


Nastavek previdno namestite na ohišje zobne ščetke. Za normalno delovanje nastavka mora biti med ohišjem in nastavkom ozka reža.



Da preprečite škropljenje zobne paste, pred uporabo nanesite majhno količino paste na ščetko. (Z ultrazvočno zobno ščetkoo porabite manj zobne paste kot z običajno zobno ščetko.)




Glavo ščetke operite z vodo in jo položite v usta.
Za začetek čiščenja ščetko vklopite.

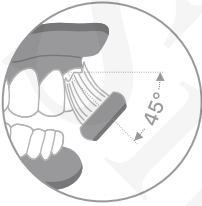

Za ustrezno čiščenje zob ščetine počasi premikajte
pod kotom 45° vzdolž dlesni.




Držite za ročaj in ščetko počasi premikajte s
krožnimi gibi. Ne pritiskajte preveč.

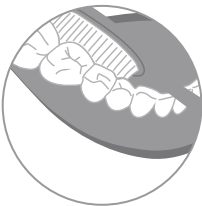


Po umivanju ščetko operite z vodo.

Nega in vzdrževanje

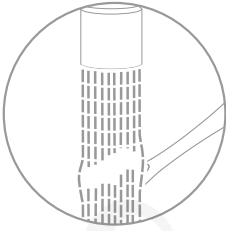


Čiščenje nastavka zobne ščetke

Po vsaki uporabi očistite glavo ščetke in jo naravno posušite na zraku.

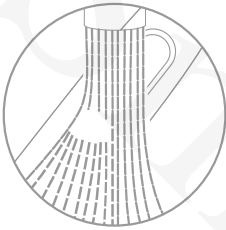


Čiščenje ogrodja

Očistite telo z mehko krpo.

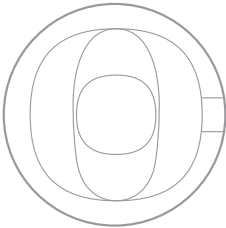

Čiščenje polnilca

Umazane dele polnilnika očistite z mehko krpo. Pred čiščenjem polnilnika izvalcite napajalni kabel iz vtičnice in ga ponovno uporabite šele, ko je popolnoma suh.

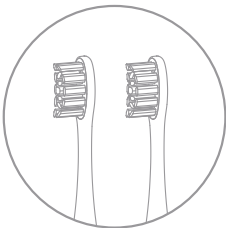

Zamenjava nastavka zobne ščetke

Glavo ščetke je priporočljivo zamenjati vsake dva do tri mesece.



Čiščenje podstavka ročaja

Pred polnjenjem naj bo dno vedno čisto in suho. Umazane dele ročaja očistite z mehko krpo.

Tehnični podatki

Ime izdelka	Pametna sonična električna zobna ščetka
Model	Oclean X/Oclean X Pro
Moč magnetnega polja	280 gf.cm
Moč	5 W
Polnilec	USB polnilna postaja Oclean
Trajanje delovanja	20 dni (*)
Vhod	5V/1A
Kapaciteta baterije	800 mAh
Čas polnjenja:	2 uri
Bluetooth	Bluetooth 4.0 in novejši

* Velja za 2 minuti ščetkanja, dvakrat dnevno.

Izjava o skladnosti FCC

Ta naprava je v skladu z delom 15 pravilnika FCC. Delovanje je odvisno od naslednjih pogojev: (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti kakršno koli motnjo, vključno z motnjo, ki lahko povzroči neželeno delovanje.

Opomba: Ta oprema je bila testirana in je v skladu z omejitvami za digitalno napravo razreda B, kot je določeno v delu 15 pravilnika FCC. Te omejitve so določene tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo ter lahko, če ni nameščena in se ne uporablja v skladu z navodili, povzroča motnje v radijski komunikaciji. Kljub temu ni izključeno, da se motnje ne pojavijo pri določeni namestitvi. Če ta oprema škodljivo vpliva na radijski ali televizijski sprejem, kar lahko ugotovite z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskusi preprečiti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:

- (1) Obrnite ali premestite sprejemno anteno.
- (2) Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
- (3) Povežite opremo z vtičnico, ki je v drugem tokokrogu kot sprejemnik.
- (4) Posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim strokovnjakom za radio/TV.

Izjava EU o skladnosti

Podjetje Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd. izjavlja, da je ta naprava skladna z RED direktivo 2014/53/EU. Celotna izjava o skladnosti, je na voljo na naslednji povezavi:

<https://www.mishop.si/content/10-uporabniski-prirocniki-xiaomi>

Ime komponente	Strupene ter škodljive snovi in elementi						Varovanje okolja
	Svinec Pb	Živo srebro Hg	Kadmij Cd	Krom (VI) Cr6+	Polibromodifenil PBB	Polibrominirani difenil eter PBDE	
Bloki za tiskana vezja	X	O	O	O	O	O	Za obdobje 10 let
Plastični elementi	X	O	O	O	O	O	
Kovinski izdelki	X	O	O	O	O	O	
Fleksibilno tiskano vezje	X	O	O	O	O	O	

Ime komponente	Strupene ter škodljive snovi in elementi						Varovanje okolja
	Svinec Pb	Živo srebro Hg	Kadmij Cd	Krom (VI) Cr6+	Polibromodifenil PBB	Polibrominirani difenil eter PBDE	
Vibracijski motor	X	O	O	O	O	O	Za obdobje 10 let
Elektroakustične naprave	X	O	O	O	O	O	
Dodatki	X	O	O	O	X	O	
Baterija	X	O	X	O	O	O	Obdobje 5 let

Opomba:

O: vsebnost strupenih in škodljivih snovi v vseh homogenih materialih
komponente je v okviru zahtev standarda GB/T 26572-2011;

X: vsebnost strupenih in škodljivih snovi je vsaj v eni od komponent
homogenih materialov višja od zahtev standarda GB/T 26572-2011;

Oclean
Facebook stran



www.facebook.com/ocleanofficial

Prenos aplikacije



www.oclean.com/download

FDA FC RoHS

CE IPX7  

www.oclean.com